

عناوين

	پانسمان هيدروكلوئيد
۲	. هيدروكلوئيد نازك شفاف
۳	. بوردر دار (هيدروكلوئيد ضخيم)
۴	. بوردر دار ساكروم (هيدروكلوئيد ضخيم ساكروم)
	پانسمان فوم
۶	. پانسمان فوم پلى اورتان دور چسب دار / بدون چسب
۷	. پانسمان فوم سيليكونى دور چسب دار / بدون چسب
	پانسمان آماده
۸	. پانسمان آماده جهت عروق محيطى (چسب آئزيوكت)
۹	. پانسمان استريل آماده
۱۰	. پانسمان استريل آماده ضد آب
	كيسه استومى
	. سيستم استومى يك تکه
۱۴	كيسه كلوستومى / ايلئوستومى ته باز
۱۵	كيسه كلوستومى / ايلئوستومى ته بسته
۱۶	كيسه يورستومى
	. سيستم استومى دو تکه
۱۷	كيسه كلوستومى / ايلئوستومى ته باز
۱۸	كيسه كلوستومى / ايلئوستومى ته بسته
۱۹	كيسه يورستومى
۲۰	چسب پايه

WOUND DRESSING پانسمان

پانسمان‌های پیشرفته (Advanced Wound Dressing)

پانسمان‌هایی هستند که برای دستیابی به بهبود سریع و کامل زخم‌های مزمن، نقش فعالی دارند و امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. به دلیل مسائل اقتصادی در سراسر جهان، استراتژی‌های جدیدی به منظور بهبود سریع زخم طراحی شده است. تمرکز اصلی درمان در این استراتژی‌ها برای درمان زخم‌های مزمن از جمله: قطع عضو، زخم‌های دیابتی، زخم‌های وریدی و شریانی، زخم‌های ناشی از عوارض ناخواسته جراحی (Complication) و سوختگی‌ها است. به طور خلاصه، چشم انداز بهبود و درمان زخم با پانسمان‌های پیشرفته که رشد روز افزونی دارد، اسباب ترمیم سریع و صحیح زخم را با کمترین عوارض فراهم می‌آورد.




پانسمان هیدروکلوئید

نام محصول	هیدروکلوئید نازک شفاف Hydrocolloid Extra Thin Wound Dressing
سایز (cm)	10 * 10 15 * 15 6 * 2
تعداد	20,100 pcs in Box 800,1200, 2000 pcs in Carton
موارد استفاده	<ul style="list-style-type: none"> زخم‌های غیر عفونی با ترشحات کم زخم‌های فشاری (زخم بستر) مرحله اپیتلیزاسیون روی سوچور جراحی به عنوان پانسمان ثانویه روی هیدروژل
طریقه مصرف	<ul style="list-style-type: none"> پانسمان باید ۱ الی ۲ ساتی متر بزرگ تر از زخم انتخاب شود.

احتیاط:

- تعویض پانسمان بدون درد و تروماتیزه کردن زخم است.
- در افراد دیابتیک توصیه نمی‌شود.

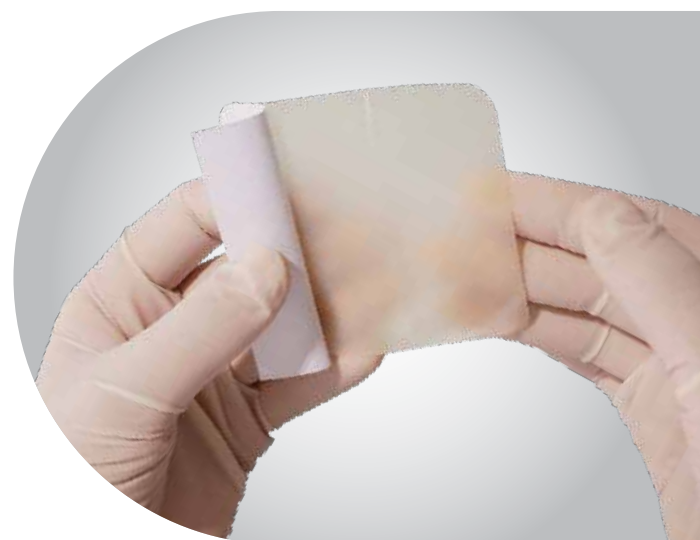

Hydrocolloid Dressing

پانسمان هیدروکلوئید

پانسمان هیدروکلوئید، Semi Occlusive تشکیل شده از ژلاتین یا پکتین و یا کربوکسی متیل سلولز (CMC)

. ایجاد یک محیط مرطوب و استریل، غیر قابل نفوذ به باکتری‌ها و محیط مناسبی برای ترمیم زخم

. ایجاد یک محیط ترمیم مناسب و استریل جهت زخم‌های غیر عفونی

. تشکیل ژل در تماس با زخم به دلیل وجود کربوکسی متیل سلولز (CMC)

. لایه بیرونی پلی اورتان، موجود در ضخامت‌های مختلف

. نفوذ ناپذیر نسبت به باکتری و امکان وتیلیزاسیون (تنفس) برای زخم


. جذب ترشحات به صورت عمودی

پانسمان هیدروکلوئید

بوردردار ساکروم (هیدروکلوئید ضخیم ساکروم) Hydrocolloid Sacral Wound Dressing with Border	نام محصول
15 * 18	سایز (cm)
5 pcs in Box 400 pcs in Carton	تعداد
<ul style="list-style-type: none"> مناسب زخم‌های فشاری با ترشحات کم پانسمان مناسب برای ساکروم و تروکاتر 	موارد استفاده
<ul style="list-style-type: none"> پانسمان هیدروکلوئید باید ۱ الی ۲ ساتی متر بزرگتر از زخم انتخاب شود. 	طریقه مصرف

احتیاط:

- تعویض پانسمان بدون درد و تروماتیزه کردن زخم است.
- در افراد دیابتیک توصیه نمی‌شود.

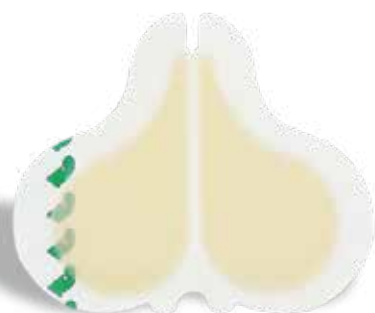

پانسمان هیدروکلوئید

بوردردار (هیدروکلوئید ضخیم) Hydrocolloid Wound Dressing with Border	نام محصول
10 * 10 15 * 15	سایز (cm)
10 pcs in Box 400, 600 pcs in Carton	تعداد
<ul style="list-style-type: none"> مناسب زخم‌های فشاری با ترشحات کم زخم در مرحله گرانولیشن ضد آب و باکتری 	موارد استفاده
<ul style="list-style-type: none"> پانسمان باید ۱ الی ۲ ساتی متر بزرگتر از زخم انتخاب شود. 	طریقه مصرف

احتیاط:

- تعویض پانسمان بدون درد و تروماتیزه کردن زخم است.
- در افراد دیابتیک توصیه نمی‌شود.



پانسمان فوم

فوم پلی‌اورتان دور چسب‌دار / بدون چسب Polyurethane Foam Dressing with/without Adhesive Border	نام محصول
10 * 10 15 * 15	سایز (cm)
10 pcs in Box 200 pcs in Carton	تعداد
. فوم جاذب، غیرچسبنده، ضد باکتری . پد محافظ جاذب خارجی با افزایش سرعت انتقال بخار مرطوب . محافظت اطراف زخم از له شدگی	ویژگی
. زخم با محلول شستشوی مناسب شستشو شود. . لایه شفاف محافظ فقط از روی پانسمان جدا شود. . مستقیماً روی زخم گذاشته شود و در صورت نیازی توان با قیچی استریل به اندازه سایز زخم برش دهید.	طریقه مصرف

احتیاط:


- . پانسمان باید ۱ الی ۲ سانتی‌متر بزرگ تر از زخم انتخاب شود.
- . تعویض پانسمان بدون درد و تروماتیزه کردن زخم است.
- . در مدل‌های دور چسب‌دار نیاز به پانسمان ثانویه نیست.



Foam Dressing

پانسمان فوم

- . مناسب برای زخم با ترشحات نسبتاً زیاد
- . جذب ترشحات به صورت عمودی
- . استفاده به جهت کم کردن فشار از روی بافت و پیشگیری از ایجاد زخم بستر
- . به حداقل رساندن خطر آسیب به پوست اطراف زخم

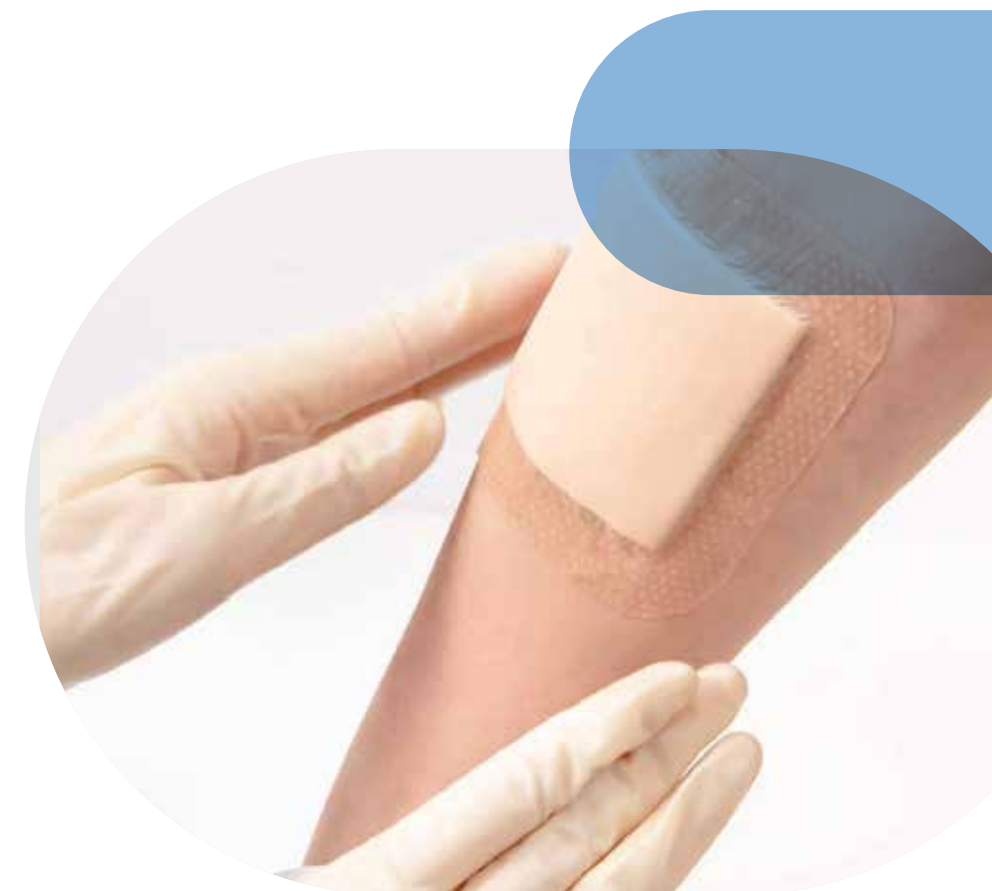

Wound Dressing

پانسمان آماده

چسب آنژیوکت جهت عروق محیطی	نام محصول
Disposable I.V. Dressing	
6 * 8	سایز (cm)
50 pcs in Box 2500 pcs in Carton	تعداد
. پانسمان Non_Woven و Transparent (ضد حساسیت) . مناسب برای ثابت نگه داشتن کاتترهای محیطی (IV)	ویژگی



پانسمان فوم

فوم سیلیکونی دور چسب دار / بدون چسب Silicon Foam Dressing with/without Adhesive Border	نام محصول
10 * 10 15 * 15	سایز (cm)
10 pcs in Box 200 pcs in Carton	تعداد
. فوم جاذب پلی اورتان (PU)، ضد باکتری، غیر چسبنده سیلیکونی . مناسب زخم‌های فشاری . پد محافظ جاذب خارجی با قابلیت تنظیم میزان تبخیر رطوبت ¹ (MVTR) با توجه به میزان ترشحات برای جلوگیری از له شدگی زخم و اطراف آن . ایجاد تعادل رطوبت، بهبود و ترمیم زخم به دلیل وجود لایه سیلیکونی	ویژگی
. آماده‌سازی زخم و شستشو زخم با محلول شستشوی زخم مناسب . جدا کردن لایه شفاف از روی پانسمان . قرار دادن مستقیم بر روی زخم و ثابت نگه داشتن آن توسط پانسمان ثانویه	طریقه مصرف

1/ Moisture Vapor Transmission Rate

احتیاط:

. در مدل‌های دور چسب دار نیاز به پانسمان ثانویه نیست.
. پانسمان باید ۱ الی ۲ سانتی متر بزرگ‌تر از زخم انتخاب شود.
. تعویض پانسمان بدون درد و تروماتیزه شدن زخم است.



پانسمان آماده


نام محصول	پانسمان استریل آماده ضد آب Disposable Sterile Waterproof Wound Dressing
سایز (cm)	10 * 10 10 * 25 10 * 15 10 * 30 10 * 20 10 * 35
تعداد	25 pcs in Box 1000 pcs in Carton 500 pcs in Carton 300 pcs in Carton
ویژگی	<ul style="list-style-type: none"> کاهش ریسک عفونت جراحی دارای پد دولایه با قدرت جذب مناسب غیر قابل نفوذ نسبت به آب و باکتری تعویض بدون درد با کمترین آسیب رسانی به زخم قابل استفاده در محل آنژیوگرافی و انواع جراحی: (لاپاراتومی، سزارین، ارتوپدی و لاپاراسکوپی) امکان حمام رفتن و یا شنا کردن با پانسمان

پانسمان آماده

نام محصول	پانسمان استریل آماده Disposable Sterile Wound Dressing
سایز (cm)	10 * 10 10 * 25 10 * 15 10 * 30 10 * 20 10 * 35
تعداد	25 pcs in Box 1000 pcs in Carton 500 pcs in Carton 300 pcs in Carton
ویژگی	<ul style="list-style-type: none"> کاهش ریسک عفونت جراحی پانسمان Non_Woven و ضد حساسیت دارای پد دولایه با قدرت جذب مناسب تعویض بدون درد با کمترین آسیب رسانی به پوست اطراف پوشش آماده و سریع زخم‌های سطحی و ناشی از برش جراحی



OSTOMY
Pouch
کیسه
استومی

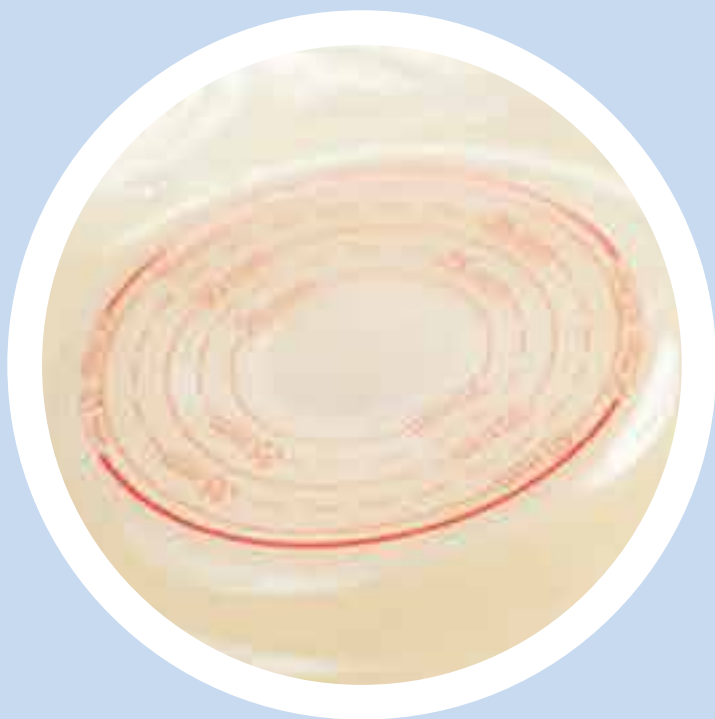

One-piece Pouching System

سیستم استومی یک تکه

کیسه کلوستومی / ایلئوستومی ته باز

Colostomy/Ileostomy Drainable Pouch

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	رنگ	تعداد در جعبه / کارتن	فیلتر	متریال	مسدود کننده
M105070	۲۹۲*۱۴۸	۷۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	گیره منعطف
M205070(F)	۲۹۲*۱۴۸	۷۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	ندارد	پارچه‌ای رنگی	گیره منعطف

ویژگی:

سیستم کیسه یک تکه شامل کیسه و ویفر (سدپوستی) می‌باشد که به صورت یک تکه به کیسه متصل می‌شود.

کیسه استومی (OSTOMY POUCH)

امروزه بیش از نیم قرن از ابداع نخستین کیسه استومی می‌گذرد. در چند دهه اخیر، طراحان با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، انواع نوینی از کیسه‌ها را طراحی نموده‌اند که با هدف راحتی بیشتر بیماران در اختیار آنها قرار می‌گیرد که در انواع کلوستومی، ایلئوستومی و یوروستومی وجود دارد. به طور کلی سیستم کیسه مخصوص استوما را میتوان به دو گروه کلی سیستم کیسه‌های یک تکه و کیسه‌های دو تکه تقسیم بندی کرد.

هر کدام از این گروه‌ها خود شامل سه دسته‌بندی جدا می‌شوند که شامل کیسه ته باز یا قابل تخلیه، کیسه ته بسته و کیسه دارای شیر تخلیه می‌شود. همچنین بسیاری از کیسه‌ها قابل برش هستند و از نظر رنگ نیز به دو گروه مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند که شامل کیسه‌های شفاف و کیسه‌های مات می‌شود. کیسه‌های شفاف معمولاً پس از انجام عمل جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا پزشک و کادر درمانی بتوانند مقدار مواد دفعی و کیفیت آن را بسنجند.



سیستم استومی یک تکه

کیسه یوروستومی

Urostomy Pouch

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	رنگ	تعداد در جعبه / کارتن	فیلتر	متریال	مسدود کننده
M107060	۲۷۸*۱۶۰	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	ندارد
M207060(F)	۲۷۸*۱۶۰	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	ندارد	پارچه‌ای رنگی	ندارد
M207(H)060(F)	۲۷۸*۱۶۰	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	دارد	پارچه‌ای رنگی	ندارد

. ویژگی:

سیستم یک تکه شامل کیسه و ویفر است که به صورت یک تکه به کیسه متصل می‌شود.



سیستم استومی یک تکه

کیسه کلوستومی / ایلئوستومی ته بسته

Colostomy / Ileostomy Closed Pouch

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	رنگ	تعداد در جعبه / کارتن	فیلتر	متریال	مسدود کننده
M101060	۱۹۰*۱۴۸	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	ندارد
M201060(F)	۱۹۰*۱۴۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	ندارد	پارچه‌ای رنگی	ندارد

. ویژگی:

سیستم یک تکه ته بسته، برای برداشتن پس از استفاده طراحی شده است. این کیسه‌ها برای خروجی (مدفوع) کمتر و یا قابل پیش بینی مناسب هستند.



سیستم استومی دو تکه

کیسه کلوستومی / ایلئوستومی ته بسته

Colostomy / Ileostomy Closed Pouch

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	رنگ	تعداد در جعبه / کارتن	فیلتر	متریال	مسدود کننده
M301060	۱۹۰*۱۴۸	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	ندارد
M401060(F)	۱۹۰*۱۴۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	ندارد	پارچه‌ای رنگی	ندارد
M401(H)060(F)	۱۹۰*۱۴۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	دارد	پارچه‌ای رنگی	ندارد
M401(H)070(F)	۱۹۰*۱۴۸	۷۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	دارد	پارچه‌ای رنگی	ندارد

ویژگی:

کیسه و چسب پایه (محافظ پوست) جدا از یکدیگر می‌باشند. بعد از هر بار استفاده باید آن را تعویض کرد.

دارای حلقه اتصال با قابلیت انعطاف پذیری بالا جهت ایجاد یک اتصال مطمئن با کیسه، راحت و ایمن در پوزیشن‌های مختلف بیمار است. قابلیت اتصال به کمربند را دارد.

Two-piece Pouching System

سیستم استومی دو تکه

کیسه کلوستومی / ایلئوستومی ته باز

Colostomy / Ileostomy Drainable Pouch

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	رنگ	تعداد در جعبه / کارتن	فیلتر	متریال	مسدود کننده
M305060	۲۹۲*۱۴۸	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	گیره منعطف
M405060(F)	۲۹۲*۱۴۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	ندارد	پارچه‌ای رنگی	گیره منعطف
M305(H)060	۲۹۲*۱۴۸	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	دارد	فیلم شفاف	گیره منعطف
M405(H)060(F)	۲۹۲*۱۴۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	دارد	پارچه‌ای رنگی	گیره منعطف
M306060	۲۹۲*۱۴۲	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	کلیپس

ویژگی:

کیسه و چسب پایه (محافظ پوست) جدا از یکدیگر می‌باشند. در صورت استفاده (هنگام پرشدن یک سوم حجم کیسه) قابل تخلیه هستند.

دارای حلقه اتصال با قابلیت انعطاف پذیری بالا جهت ایجاد یک اتصال مطمئن با کیسه، راحت و ایمن در پوزیشن‌های مختلف بیمار است.

قابلیت اتصال به کمربند را دارد.



سیستم استومی دو تکه

چسب پایه

Ostomy Wafer / Flanges

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	نوع	تعداد در جعبه / کارتن
M701060	۱۶۰*۲۷۸	۶۰	هیدروکلونید برییر	۵۰/۱۰
M701070	۱۶۰*۲۷۸	۷۰	هیدروکلونید برییر	۵۰/۱۰

ویژگی:

مناسب برای کیسه کلاستومی، ایلئوستومی و یوروستومی دو تکه و دارای قابلیت برش در اندازه دلخواه و سایزهای مختلف است.

برای کیسه کلاستومی، ایلئوستومی و یوروستومی دو تکه مورد استفاده است.

عاری از لاتکس و ضد حساسیت است.

قدرت چسبندگی بالایی دارد و در عین حال حافظ سلامت پوست بیمار است.

دارای سطحی صاف و یکپارچه و انعطاف پذیری بالا و اتصال ایمن است.

باید حداکثر بعد از مدت ۳ روز تعویض شود.



سیستم استومی دو تکه

کیسه یوروستومی

Urostomy Pouch

مدل	سایز (mm)	ماکزیمم برش (mm)	رنگ	تعداد در جعبه / کارتن	فیلتر	متریال	مسدود کننده
M307060	۱۶۰*۲۷۸	۶۰	شفاف	۵۰/۱۰	ندارد	فیلم شفاف	شیر تخلیه
M407060(F)	۱۶۰*۲۷۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	ندارد	پارچه‌ای رنگی	شیر تخلیه
M407(H)060(F)	۱۶۰*۲۷۸	۶۰	رنگ کرم	۵۰/۱۰	دارد	پارچه‌ای رنگی	شیر تخلیه

ویژگی:

کیسه و چسب پایه (محافظ پوستی) جدا از یکدیگر می‌باشند. در صورت استفاده (هنگام پر شدن یک سوم حجم کیسه) قابل تخلیه است.



